

# Axygen® 加長微量滴管

—— 身材更纖細，適合應用於狹長容器

**AXYGEN**

A Corning Brand

NEW



您還在為儲存在狹長樣品管中的珍貴試劑或樣本不能全部吸取出而困擾嗎？您還在為液體分注時污染微量分注器而煩惱嗎？是時候選擇一款加長微量滴管了。Axygen®加長微量滴管採用獨特設計，身材更修長，透明度更高，與絕大多數微量分注器兼容；不僅適合一般性實驗，更能滿足高階液體分注需求。

## 產品特點

- ▶ 比普通微量滴管更纖長
- ▶ 微量滴管表面帶有刻度，輕鬆判斷吸液/分液體積
- ▶ 嚴格控制的生產環境潔淨度可達10萬級
- ▶ 原材料符合美國FDA USP Class VI的標準
- ▶ 無DNase，無RNase，無pyrogenic，無human gDNA
- ▶ 供料系統採用中央控料，杜絕污染
- ▶ 可耐受高溫高壓滅菌（121°C，15分鐘）
- ▶ 多種包裝規格可選



使用10ul加長微量滴管吸取抗體（100ul/管，1ml管裝），可以直接吸到管底，並且由於微量滴管尖部細長，微量滴管外殘留的抗體比普通微量滴管少許多。

200ul加長微量滴管吸取呈色緩衝液或細胞染色液時，微量滴管長度保證微量分注器的排取液軸 (Tip ejector) 不被污染。

用200ul或1ml加長微量滴管吸取Matrigel®，可以吸到瓶底，節省試劑；並且微量滴管上端露於瓶口外，微量分注器的排取液軸 (Tip ejector) 不會接觸瓶口，無污染。



圖1. 用1mL加長微量滴管為小的細胞培養瓶（T25）直接換液，簡單方便

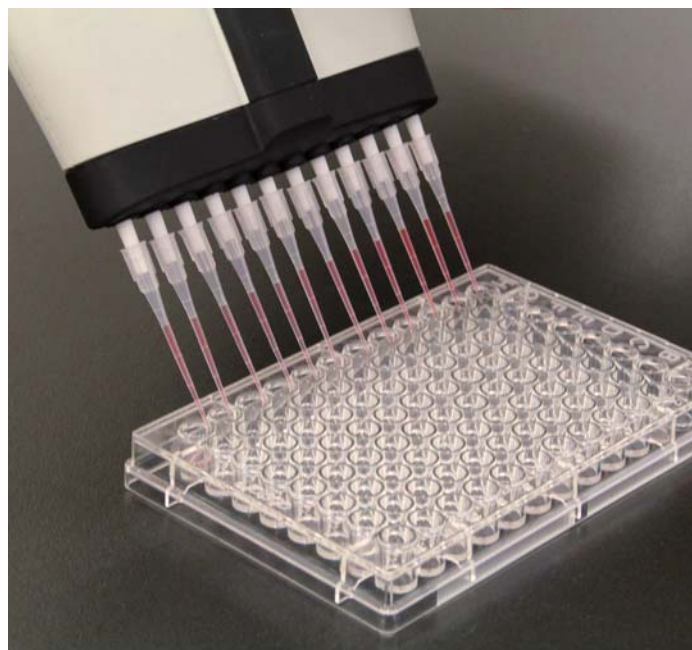


圖2. 用10ul加長微量滴管進行微量液體分注，更準確

## 10 µl加長微量滴管


- ▶ 長達45mm，比普通微量滴管更長，適用於微量液體分注，可以輕鬆接觸試劑管/樣品管管底
- ▶ 2ul、5ul和10ul處有刻度標記
- ▶ 最小液體分注量0.1 ul
- ▶ 兼容絕大多數微量分注器



## 200 µl加長微量滴管


Coming soon

- ▶ 長達77.5mm，可以輕鬆接觸容器底部，而不污染微量分注器的排取液軸 (Tip ejector)。
- ▶ 10ul、50ul、100ul和200ul處有刻度標記
- ▶ 最小移液量1 ul
- ▶ 兼容絕大多數微量分注器

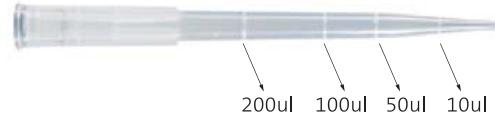

## 1000 µl加長微量滴管

- ▶ 長達102mm，可以輕鬆接觸樣品管管底，而不污染微量分注器的排取液軸 (Tip ejector)。
- ▶ 200ul、500ul和1000ul處有刻度標記
- ▶ 兼容絕大多數微量分注器
- ▶ 深孔容器最合適

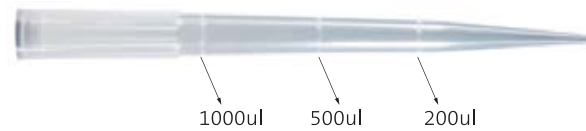

## 訂購信息

貨號	描述	包裝規格
T-10XT-C	10ul加長微量滴管，透明，袋裝，未滅菌	1000支/袋，10袋/箱
T-10XT-C-R-S	10ul加長微量滴管，透明，盒裝，滅菌	96支/盒，10盒/包，5包/箱
<small>Coming soon</small> T-200XT-C	200ul加長微量滴管，透明，袋裝，未滅菌	1000支/袋，10袋/箱
<small>Coming soon</small> T-200XT-C-R-S	200ul加長微量滴管，透明，盒裝，滅菌	96支/盒，8盒/包，5包/箱
T-1000XT-C	1000ul加長微量滴管，透明，袋裝，未滅菌	768支/袋，10袋/箱
T-1000XT-C-R-S	1000ul加長微量滴管，透明，盒裝，滅菌	96支/盒，8盒/包，5包/箱

CORNING

FALCON®

AXYGEN®

GOSELIN™

PYREX®

波仕特生物科技

Protech Technology Enterprise Co., Ltd.

北區 0800-231-530 竹苗 0800-500-110 中部 0800-555-650 南部 0800-268-266  
台北 02-26557677 竹南 037-680138 台中 04-22624883 高雄 07-3425707

